


קורס קדם כירורגיה

2

ערכה מס'

סט הכלים הכירורגי

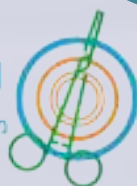

ברוכים הבאים

מתמחים יקרים,

אנו, צוות סימולטק, רופאי ואחיות חדר ניתוח, מברכים אתכם עם הצטרפותכם לשורות הצוות הכירורגי ומאחלים לכם אתגר, ענין והצלחה בעבודה חשובה זו.

בחדר הניתוח פועלים בשיתוף פעולה הדוק מנתחים, מרדימים, אחיות וצוות עובדים פארא-רפואיים. לנגד עינינו עומדת המטרה של הצלחת הפעולה הכירורגית, תוך אבטחת והבטחת איכות הטיפול במנותח ובטיחותו.

להבנתנו, ישנם שלושה מפתחות חיוניים להצלחתו של המנתח:

א. מקצוענות בכירורגיה - על המנתח להכיר את משימותיו, להתכונן היטב לניתוח ולהגיע אליו במיטבו, תוך יישום טכניקות ניתוח אופטימליות.

ב. מחויבות אישית לעמידה בנהלים - נהלי חדר ניתוח מבטיחים סטנדרטים עקביים ואיכותיים, והם הדרך הטובה ביותר להפחתת סיבוכים ולמניעת זיהומים. על-כן, על המנתח להפגין בקיאות בנהלי חדר הניתוח וליישם כלשונם.

ג. עבודת צוות אופטימלית - תהליך הניתוח עשוי להיות אירוע מלחיץ. בנוסף, מעורבים בו גורמים רבים ולכל אחד תפקיד ייחודי. הבסיס לניתוח מוצלח הינו עבודת צוות טובה, שבה כל חבר צוות פועל בשיתוף פעולה מרבי עם חברי הצוות האחרים, תוך שמירה על יחסי עבודה תקינים וכבוד הדדי.

הכשרה זו נבנתה לאור עקרונות מנחים אלה ואנו מקווים כי תאמצו אותם והם ינחו אתכם בדרככם להפוך לרופאים מנתחים מקצועיים, מחויבים וערכיים.

כמו כן, אנו מקווים כי ההכשרה תסייע לכם בצעדיכם הראשונים בחדר ניתוח!

מאחלים לכם למידה פורה ומהנה,
צוות סימולטק



מבוא

מתמחים יקרים,

לפניכם ערכה ללמידה עצמית הכוללת מידע לגבי סט הכלים הכירורגי הבסיסי, בו תעשו שימוש בחדר הניתוח.

ערכה זו הינה שניה במערך בן 4 ערכות, המלוות את ההכשרה בסימולטק:

2

סט הכלים
הכירורגי

1

הכנה ותפקוד
בחדר ניתוח

3

מיומנויות
כירורגיות

4

התנהלות בחדר
ניתוח

הערכות מבוססות על נהלי קופת חולים ומשרד הבריאות והן כוללות מידע, הנחיות, דגשים ופעולות שיש לבצע לפני הניתוח, במהלכו ובתומו.

תכני הערכה

בערכה זו מוצגים כ-30 כלים נבחרים. היות ומגוון הכלים הוא רחב ומשתנה בין דיסציפלינות כירורגיות שונות, בחרנו להתמקד בערכה זו בכלים המדגימים את העקרונות הכירורגיים הבסיסיים והשכיחים ביותר.

חשוב לציין כי הכלים הכירורגיים, באים במגוון צורות וגדלים. ולפיכך יתכן ובחדר הניתוח תפגשו כלים דומים, בעלי שמות דומים, אולם בגודל אחר מהמתואר כאן. 

כיצד להשתמש בערכה זו?

הערכה הינה חלק מתכני החובה בקורס כירורגיה הניתן בסימולטק, לכן עליכם לקרוא את הערכה ולהפגין בקיאות בתוכנה לפני ההגעה לשיעור העוסק בכלים ומיומנויות כירורגיות, שבו תתרגלו את הידע הנלמד. לנוחותכם, בסוף הערכה מופיעות שאלות לתרגול ולבחינה עצמית.

מבנה הערכה | סט הכלים הכירורגי

לחץ על שם הפרק על מנת לעבור אליו

01 חיתוך וגזירה

■ סקלפל

- 6..... מחזיק להב
- 7..... להב

■ מספריים

- 8..... מאיו
- 9..... מצנבאום
- 10..... **השוואה מספריים**

03 המוסטטיים

■ המוסטזה

- 25..... מוסקיטו
- 26..... קלי
- 27..... פה-אן
- 28..... **השוואת המוסטטיים**
- 29..... **רייט אנגל**
- 30..... **מהדק**
- 31..... **סקשן**

בחן את עצמך

- 42..... **בחן את עצמך**

02 תפיסה ואחיזה

- 12..... **מחזיק מחט**
- 13..... **מחזיק בד**
- **פינצטות**
- 14..... כירורגית
- 15..... אנטומית
- 16..... אדסון
- 17..... דה בייקי
- 18..... **השוואת פינצטות**
- **גרספרים**
- 19..... קוכר
- 20..... קראוזה
- 21..... אליס
- 22..... בבקוק
- 23..... **השוואת גרספרים**

04 רטרקטורים

■ ידניים שטחיים

- 33..... סקין הוק
- 34..... רו
- 35..... לנגנבק

■ ידניים עמוקים

- 36..... ריצ'רדסון
- 37..... פריץ'
- 38..... דיוור
- 39..... פלקסיבל

■ מעוגנים

- 40..... בלפור
- 41..... בוקוולטר



חיתוך וגזירה | תפיסה ואחיזה | המוסטטיים | רטרקטורים | בחן את עצמך

כלי חיתוך וגזירה

קורס קדם כירורגיה



ימולטק
מרכז לימודים וחינוך
רפואה



Scalpel – Handle

מחזיק להב/סכין

שימוש

- מחזיק להב סקלפל

מאפייני זיהוי

- בראש הידית מנגנון לנעילת הלהב בכיוון נכון
- לפרקים בעל שנתות למדידה (כסרגל)

אחיזה

- יש להחזיק את הידית באופן שיאפשר שליטה מלאה בחיתוך וחופש תנועה בין האגודל לאצבעות 3 ו-4
- אצבע 2 מונחת על גב הידית על מנת לספק שליטה מלאה
- לחיתוך, יש לבצע תנועה חלקה תוך שימוש ב- "בטן" של הלהב ולא בחוד
- אין צורך בהפעלת לחץ ניכר על הידית שכן הלהבים חדים ביותר





Scalpel – Blades

להב

שימוש

- חיתוך והפרדה בין רקמות
- להב 10 הוא הנפוץ ביותר לחיתוך העור ברוב הניתוחים
- להב 11 משמש לרוב לניקוז מורסות והכנסת טרוקרים בפרוסקופיה
- להב 15 משמש לחיתוכים עדינים



מאפייני זיהוי

- להב 10 הוא בעל "בטן" וחוד
- להב 11 הוא להב משולש עם חוד ("כידון")
- להב 15 הוא גרסה קטנה יותר של להב 10

החזקה

- יש לעגן את הלהב בראש ידית הסקלפל

דגשים

- פחות טראומטי ממספרים או מכשור חשמלי
- גודל הלהב אינו משנה את טכניקת החיתוך



Scissors – Mayo

מספרי מאיו, מאיו

שימוש

- מספריים לשימוש כללי
- חיתוך והפרדה בין רקמות גסות
- חיתוך תפרים וחבישות

מאפייני זיהוי

- מספריים רחבים
- קצה הלהב מעוגל
- אורך הידית דומה לאורך הלהב

החזקה

- רוב המספריים מיועדים לימניים. יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש המספריים, ולהיעזר באצבע השנייה על פני הזרועות בכדי לשלוט בכיוון החיתוך

דגשים

- על מנת למנוע פגיעה לא מכוונת, אין לבצע חיתוך מבלי לראות את קצות הלהבים בבירור
- יש להקפיד על: מיקום נכון, שליטה מוחלטת במספריים, ויזואליזציה מלאה של הרקמה או התפר
- מספרים ישרים משמשים לעבודה על פני השטח, מעוקלים לעבודה בעומק
- לרוב, רק קצה המספריים משמש לחיתוך, אלא אם מדובר ברקמה קשה ואז יש להיעזר בחלק הפנימי יותר של הלהב



Scissors – Metzenbaum

מספרי מץ, מץ, מצנבאום

שימוש

- חיתוך והפרדה בין רקמות עדינות

מאפייני זיהוי



- מספרים צרים
- קצה הלהב מעוגל
- הידית ארוכה יותר מהלהב

החזקה

- רוב המספרים מיועדים לימניים. יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש המספרים, ולהיעזר באצבע השנייה על פני הזרועות בכדי לשלוט בכיוון החיתוך

דגשים

- על מנת למנוע פגיעה לא מכוונת, אין לבצע חיתוך מבלי לראות את קצות הלהבים בבירור
- יש להקפיד על: מיקום נכון, שליטה מוחלטת במספרים, ויזואליזציה מלאה של הרקמה או התפר
- מספרים ישרים משמשים לעבודה על פני השטח, מעוקלים לעבודה בעומק
- לרוב, רק קצה המספרים משמש לחיתוך, אלא אם מדובר ברקמה קשה ואז יש להיעזר בחלק הפנימי יותר של הלהב



Scissors – Comparison

השוואת מספריים



Metzenbaum



Mayo

שים לב - מספרי מצנבאום צרים יותר ממספרי מין, והידית שלהם ארוכה יותר ביחס ללהב. עם זאת, לשני זוגות המספרים קצה להב מעוגל.





חיתוך וגזירה | תפיסה ואחיזה | המוסטטיים | רטרקטורים | בחן את עצמך

כלי תפיסה ואחיזה

קורס קדם כירורגיה



ימולטק
מרכז לימודים וחינוך
רפואה



Needle Holder/Driver

מחזיק מחט

שימוש

- משמשים להחזקת המחט בזמן תפירה

Needle Holders: Webster



מאפייני זיהוי

- ידית עם מנגנון נעילה
- משטח החזקה רחב

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש מחזיק המחט, ולהיעזר באצבע השנייה על פני הזרועות בכדי לשלוט בכיוון התפירה

דגשים

- יש לאחוז את המחט בשליש הקרוב לחוט, בזווית של 90° למחזיק המחט
- אין לדחוף את המחט לתוך הרקמה. התנועה הנכונה לתפירה היא סיבוב של פרק כף היד (תנועת ציר Pivot)
- יש לקבל מחט מהאחות ולהחזיר מחט לאחות רק על גבי מחזיק מחט על מנת למזער את הסיכון לדקירה לא מכוונת



מחזיק מחט | מחזיק בד | פינצטה כירורגית | פינצטה אנטומית | אדסון | דה בייקי |
השוואת פינצטות | קוכר | קראוזה | אלים | בבקוק | השוואת מחזיקים

תפיסה ואחיזה

Towel Holder/Clamp

מחזיק בד, טוך-קלמה

שימוש

- משמשים להחזקת בד במהלך כיסוי המטופל/ת לפני פרוצדורה

מאפייני זיהוי

- ידית עם מנגנון נעילה
- קצוות קהים לאחיזת הבד

החזקה

- כמו מספריים
- יש להרחיק את הבד מגוף המטופל בעת התפיסה

דגשים

- יש לשים לב שלא לתפוס חלקי גוף של המטופל/ת!



Tissue Thumb Forceps

פינצטה כירורגית

שימוש

- הרמת והחזקת רקמה

מאפייני זיהוי

- קצה משונן

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע 2-3 (כמו עיפרון)

דגשים

- הקצה המשונן מאפשר החזקה של הרקמה מבלי שתחליק, וללא הפעלת כוח עודף
- מאידך, אין להשתמש בקצה המשונן כאשר אוחזים באיברים שאין לנקבם כגון כלי דם, מעי או שרירים





מחזיק מחט | מחזיק בד | פינצטה כירורגית | **פינצטה אנטומית** | אדסון | דה בייקי |
השוואת פינצטות | קוכר | קראוזה | אלים | בבקוק | השוואת מחזיקים

תפיסה ואחיזה

Tissue Dressing Forceps

פינצטה אנטומית

שימוש

- הרמת והחזקת רקמה

מאפייני זיהוי

- קצה ללא שיניים

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע 2-3 (כמו עיפרון)

דגשים

- לשימוש כאשר אוחזים באיברים עדינים או איברים שאין לנקבם כגון כלי דם, מעי או שרירים





מחזיק מחט | מחזיק בד | פינצטה כירורגית | פינצטה אנטומית | אדסון | דה בייקי |
השוואת פינצטות | קוכר | קראוזה | אלים | בבקוק | השוואת מחזיקים

תפיסה ואחיזה

Adson Forceps

אדסון

שימוש

- הרמת והחזקת העור

מאפייני זיהוי

- גוף רחב עם קצה צר
- הקצה יכול להיות חלק או משונן

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע 2-3 (כמו עיפרון)

דגשים

- משמשים בעיקר לתפירת תת-עור





מחזיק מחט | מחזיק בד | פינצטה כירורגית | פינצטה אנטומית | אדסון | דה בייקי |
השוואת פינצטות | קוכר | קראוזה | אלים | בבקוק | השוואת מחזיקים

תפיסה ואחיזה

DeBakey Forceps

דה-בייקי

שימוש

- מניפולציות של רקמה עדינה

מאפייני זיהוי

- פינצטה צרה

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע 2-3 (כמו עיפרון)

דגשים

- דומה לפינצטה אנטומית, אולם עדינה יותר





Thumb Forceps – Comparison

השוואת פינצטות



1x2 TEETH



2x3 TEETH



כירורגית |



SEPARATED JAWS



אנטומית |



דה בייקי |

שים לב - הפינצטה הכירורגית דומה לפינצטה האנטומית, אולם היא בעלת קצה משונן, בשונה מהפינצטה הכירורגית לה אין שיניים. פינצטת דה-בייקי דומה לפינצטה האנטומית, אולם הקצה שלה צר יותר ומתאים לעבודה מדויקת יותר עם רקמות עדינות.





מחזיק מחט | מחזיק בד | פינצטה כירורגית | פינצטה אנטומית | אדסון | דה בייקי |
השוואת פינצטות | קוכר | קראוזה | אלס | בבקוק | השוואת מחזיקים

תפיסה ואחיזה

Kocher Forceps

קוכר

שימוש

- החזקת פציה או עצם

מאפייני זיהוי

- להבים מחוספסים
- קצה משונן
- טבעות לאצבעות ומנגנון נעילה
- יכולים להיות ישרים או מעוקלים

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש הכלי. יש לסגור את הכלי עד תומו (3-4 "קליקים"). לפתיחה יש להפעיל כוח בכיוונים מנוגדים על טבעות האצבעות

דגשים

- מתוכנן להחזיק רקמה ולאפשר מתיחה
- מכשיר חזק מאוד המאפשר אחיזה איתנה ומתיחה ניכרת



מחזיק מחט | מחזיק בד | פינצטה כירורגית | פינצטה אנטומית | אדסון | דה בייקי |
השוואת פינצטות | קוכר | קראוזה | אליס | בבקוק | השוואת מחזיקים

תפיסה ואחיזה

Forester Sponge Forceps

קראוזה/תופס רקמה

שימוש

- החזקת ויסרה (מע, שלפוחית)
- החזקת ספוגים

מאפייני זיהוי

- להבים עם קצה טבעתי מחוספס
- טבעות לאצבעות ומנגנון נעילה
- יכולים להיות ישרים או מעוקלים

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש הכלי. יש לסגור את הכלי עד תומו (3-4 "קליקים"). לפתיחה יש להפעיל כוח בכיוונים מנוגדים על טבעות האצבעות

דגשים

- א-טראומטיים
- היות שחסר שיניים, הרקמה יכולה להחליק מאחיזת המכשיר ולכן יש למתוח בעדינות

Forceps: Foerster Sponge



המחזיק



המחזיק





מחזיק מחט | מחזיק בד | פינצטה כירורגית | פינצטה אנטומית | אדסון | דה בייקי |
השוואת פינצטות | קוכר | קראוזה | **אליס** | בבקוק | השוואת מחזיקים

תפיסה ואחיזה

Allis Clamps

אליס

שימוש

- החזקת עור, פציה או שד

מאפייני זיהוי

- להבים עם קצה רחב ומחוספס
- טבעות לאצבעות ומנגנון נעילה

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש הכלי. יש לסגור את הכלי עד תומו (3-4 "קליקים"). לפתיחה יש להפעיל כוח בכיוונים מנוגדים על טבעות האצבעות

דגשים

- ניתן להשתמש להחזקת עור, לרוב על ידי תפיסת הרקמה שמיד מתחת לעור ולא אחיזת העור עצמו

Tissue Forceps: Allis



LOCKING ALLIS



LOCKING ALLIS





מחזיק מחט | מחזיק בד | פינצטה כירורגית | פינצטה אנטומית | אדסון | דה בייקי |
השוואת פינצטות | קוכר | קראוזה | אלים | **בבקוק** | השוואת מחזיקים

תפיסה ואחיזה

Babcock Clamps

בבקוק

שימוש

- החזקת ויסרה (מע, שלפוחית)

מאפייני זיהוי

- להבים מעוגלים, רחבים, ללא שיניים
- טבעות לאצבעות ומנגנון נעילה

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש הכלי. יש לסגור את הכלי עד תומו (3-4 "קליקים"). לפתיחה יש להפעיל כוח בכיוונים מנוגדים על טבעות האצבעות

דגשים

- א-טראומטיים
- היות שחסר שיניים, הרקמה יכולה להחליק מאחיזת המכשיר ולכן יש למתוח בעדינות



מחזיק מחט | מחזיק בד | פינצטה כירורגית | פינצטה אנטומית | אדסון | דה בייקי |
השוואת פינצטות | קוכר | קראוזה | אלים | בבקוק | השוואת מחזיקים

תפיסה ואחיזה

Forceps – Comparison

השוואת גרספרים



בבקוק |



אלים |



קראוזה |



שים לב - לכל המכשירים טבעות אחיזה ומנגנון נעילה. ההבדל ביניהם קשור לקצה המכשיר.
לבבקוק קצה רחב לא מחוספס, לאלים קצב רחב מחוספס, ולקראוזה קצה עגול מחוספס.





חיתוך וגזירה | תפיסה ואחיזה | המוסטטיים | רטרקטורים | בחן את עצמך

כלים המוסטטיים

קורס קדם כירורגיה





Mosquito

מוסקיטו

שימוש

- תפיסת כלי דם לשליטה בדמם
- תפיסת איברים חלולים למניעת שפיכת תוכן

מאפייני זיהוי

- כלי קטן ועדין
- להב מחוספס ללא שיניים
- טבעות לאצבעות ומנגנון נעילה
- יכולים להיות ישרים או מעוקלים

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש הכלי. יש לסגור את הכלי עד תומו (3-4 "קליקים"). לפתיחה יש להפעיל כוח בכיוונים מנוגדים על טבעות האצבעות

דגשים

- א-טראומטיים



Kelly

קלי

שימוש

- תפיסת כלי דם לשליטה בדמם
- תפיסת איברים חלולים למניעת שפיכת תוכן

מאפייני זיהוי

- כלי גדול יותר מהמוסקיטו
- להב מחוספס ללא שיניים
- טבעות לאצבעות ומנגנון נעילה
- יכולים להיות ישרים או מעוקלים

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש הכלי. יש לסגור את הכלי עד תומו (3-4 "קליקים"). לפתיחה יש להפעיל כוח בכיוונים מנוגדים על טבעות האצבעות

דגשים

- א-טראומטיים



Rochester – Pean

פה-אן

שימוש

- תפיסת כלי דם לשליטה בדמם
- תפיסת איברים חלולים למניעת שפיכת תוכן

מאפייני זיהוי

- כלי גדול יותר מהקלי
- להב מחוספס ללא שיניים
- טבעות לאצבעות ומנגנון נעילה
- יכולים להיות ישרים או מעוקלים

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש הכלי. יש לסגור את הכלי עד תומו (3-4 "קליקים"). לפתיחה יש להפעיל כוח בכיוונים מנוגדים על טבעות האצבעות

דגשים

- א-טראומטיים





Hemostats – Comparison

השוואת המוסטטיים



STRAIGHT



CURVED



STRAIGHT



CURVED

Hemostats: Rochester-Pean



STRAIGHT



CURVED



מוסקיטו |



קלי |



פה-אן |



STRAIGHT



CURVED



קוּכֵר |

שים לב - לכל המכשירים טבעות אחיזה, מנגנון נעילה וקצה מחוספס. ההבדלים נוגעים לגדלים בלבד (מהקטן לגדול): מוסקיטו, קלי ופה-אן. אין לבלבל אותם עם הקוּכֵר, שהוא כלי מאסיבי בעל שיניים, שמיועד לתפיסת רקמה בחוזקה.





Right Angle

רייט-אנגל, לייה

שימוש

- תפיסת כלי דם עמוקים או זוויתיים לצורך שליטה בדמם
- תפיסת כלי דם בזמן קשירתו למניעת דימום

Hemostats: Wecker Kantrowitz



מאפייני זיהוי

- להב מחוספס ללא שיניים
- זווית ישרה בין הלהב לזרועות
- טבעות לאצבעות ומנגנון נעילה
- יכולים להיות ישרים או מעוקלים

החזקה

- יש להשתמש באגודל ובאצבע הרביעית כדי לאחוז את ראש הכלי. יש לסגור את הכלי עד תומו (3-4 "קליקים"). לפתיחה יש להפעיל כוח בכיוונים מנוגדים על טבעות האצבעות

דגשים

- א-טראומטיים



Stapler

מהדק, מכלב

שימוש

- סגירת העור בתום ניתוח

מאפייני זיהוי

- קצה עם סיכות, ידית אחיזה והדק

החזקה

- יש לקרב את שולי העור תוך סיבוב השולים כלפי חוץ עם שתי פינצטות, ובאמצעות המהדק להצמיד סיכה לשולי העור

דגשים

- יש מנתחים שאינם משחררים את ההדק לאחר שחרור הסיכה על מנת לאפשר מתיחה של העור ותפיסת הנקודה הבאה להידוק





Suction Tubes



Suction

סקשן, ראש סקשן

שימוש

- שאיבת נוזלים ודם ועשן

מאפייני זיהוי

- לכל ראשי השאיבה ראש שונה בהתאם לשימוש, וקצה שני אחיד לחיבור לצינור השאיבה

החזקה

- יש לחבר את ראש הסקשן לצינור השאיבה ולהניחו בסמוך לנוזלים שיש לשאוב

דגשים


- לכל ראש שאיבה יש שימושים אחרים, ויש להתאים את הראש הנכון לפעולה המבוקשת



חיתוך וגזירה | תפיסה ואחיזה | המוסטטיים | רטרקטורים | בחן את עצמך

רטרקטורים

קורס קדם כירורגיה

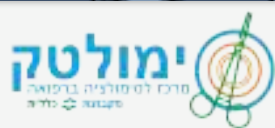



Skin hook

סקין-הוק



שימוש

- רטרקציה עדינה של עור

מאפייני זיהוי

- כלי עדין עם קצה דמוי קלשון או וו

החזקה

- ידני

דגשים

- טראומטי
- יש לבצע רטרקציה עדינה



ROUX

רו



שימוש

- רטרקציה עדינה של עור ותת עור בזמן סגירת פציה

מאפייני זיהוי

- שני קצוות מעוגלים

החזקה

- ידני

דגשים

- א-טראומטי
- יש לבצע רטרקציה עדינה



Langenbeck

לנגנבק



שימוש

- רטרקציה בניתוחים שטחיים כמו תיקון בקע
- רטרקציה של עור ופציה שטחית

מאפייני זיהוי

- ידית וקצה מאונך לה
- הקצה יכול להיות ישר או מעוקל

החזקה

- ידני

דגשים

- א-טראומטי
- יש לבצע רטרקציה עדינה



RICHARDSON

ריצ'רדסון



שימוש

- רטרקציה עמוקה בחתכים בבית החזה או הבטן

מאפייני זיהוי

- ידית וקצה מאונך לה

החזקה

- ידני

דגשים

- א-טראומטי
- יש לבצע רטרקציה עדינה



FRITCHE

פריץ'



שימוש

- רטרקציה של שלפוחית השתן
- רטרקציה עמוקה של עור, פציה ושריר

מאפייני זיהוי

- קצה רחב ומעוקל

החזקה

- ידני

דגשים

- א-טראומטי
- יש לבצע רטרקציה עדינה



DEAVER

דיוור



שימוש

- רטרקציה של איברים סולידיים כמו טחול או כבד
- רטרקציה של דופן הבטן

מאפייני זיהוי

- ידית וקצה מעוקל ורחב

החזקה

- ידני

דגשים

- א-טראומטי
- יש לבצע רטרקציה עדינה



RIBBON

פלקסיבל

שימוש

- רטרקציה עמוקה של מעי או איברים חלולים אחרים

מאפייני זיהוי

- יריעת מתכת מלבנית לרוב, הניתנת לכיפוף ועיצוב

החזקה

- ידני

דגשים

- א-טראומטי
- יש לבצע רטרקציה עדינה



BALFOUR

בלפור

Retractors: Balfour



שימוש

- רטרקציה עמוקה בניתוחי בטן
- בעל כף לרטרקציה של השלפוחית

מאפייני זיהוי

- מוט ועליו שתי כפות חלולות לרטרקציה של דפנות הבטן, וכף מלאה לרטרקציה של השלפוחית

החזקה

- אוטומטי (Self retained)

דגשים

- ניתן לכוון את הזרועות



Bookwalter

בוקוולטר



שימוש

- רטרקציה עמוקה בניתוחי בטן

מאפייני זיהוי

- אליפסה משוננת עליה מולבשות כפות הרטרקציה
- מעוגן לשולחן הניתוחים

החזקה

- אוטומטי (Self retained)

דגשים

- ניתן לשנות את מספר הכפות
- קיימות כפות בגדלים שונים



חיתוך וגזירה | תפיסה ואחיזה | המוסטטיים | רטרקטורים | בחן את עצמך

בחן את עצמך

כל הכבוד, סיימת את קריאת הערכה.
בפרק זה תוכל לבחון את ידיעותיך



קורס קדם כירורגיה







זיהוי כלים כירורגיים


איזה מבין הכלים הבאים הוא קראוזה?

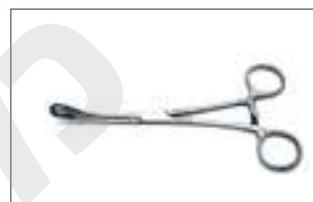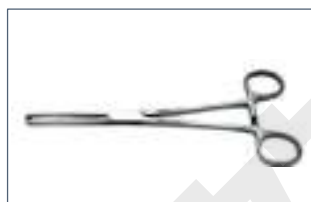

איזה מבין הכלים הבאים הוא דיור?

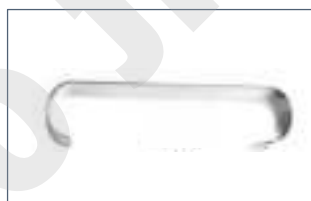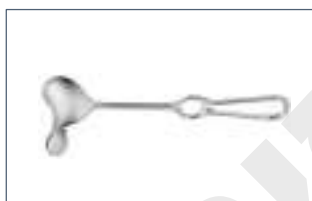

איזה מבין הכלים הבאים הוא להב מס' 15?

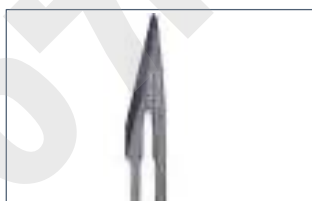

איזה מבין הכלים הבאים הוא אדסון?






זיהוי שמות כלים כירורגיים

זוהה את שמות הכלים הבאים:

1. בלפור
2. בוקלוטר
3. פריץ'
4. ריצ'רדסון

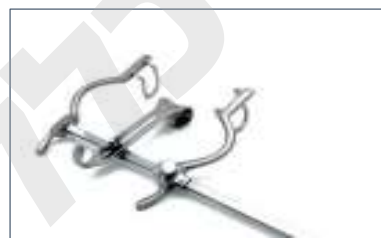

1. מצנבאום
2. מאיו
3. אליס
4. בבקוק



1. סקין הוק
2. רו
3. לנגנבק
4. ארמי-נייבי





1. קלי
2. פה-אן
3. מוסקיטו
4. רייט אנגל







זיהוי כלים כירורגיים



איזה מבין הכלים הבאים הוא קראוזה?

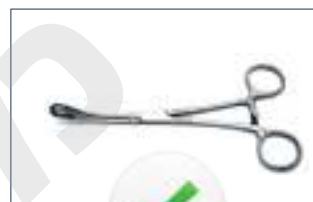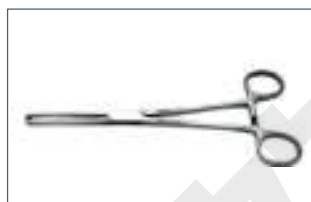


איזה מבין הכלים הבאים הוא דיור?

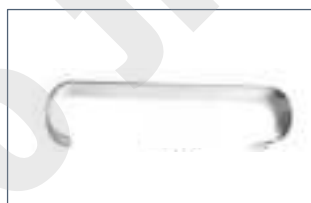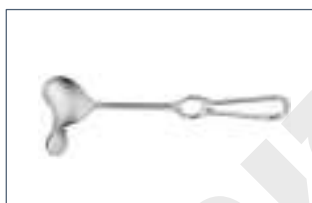

איזה מבין הכלים הבאים הוא להב מס' 15?

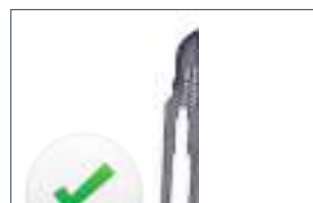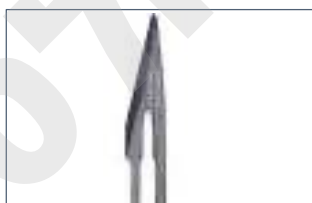

איזה מבין הכלים הבאים הוא אדסון?

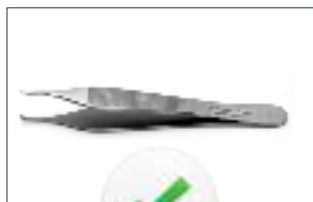





זיהוי שמות כלים כירורגיים

זוהה את שמות הכלים הבאים:

1. **בלפור**
2. בוקלוטר
3. פריץ'
4. ריצ'רדסון

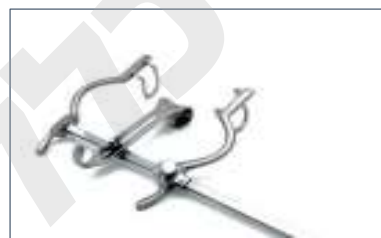

1. מצנבאום
2. **מאיו**
3. אלס
4. בבקוק

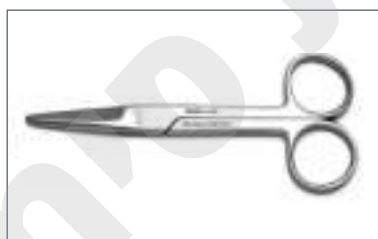

1. **סקין הוק**
2. רו
3. לנגנבק
4. ארמי-נייבי



1. קלי
2. פה-אן
3. מוסקיטו
4. **רייט אנגל**

